




SIALOR
M I L A N O

YALODÉ FILL
Sialor Milano pentru medicina estetică



office@sialormilano.ro
www.sialormilano.ro



sialor_romania




sialor romania

DEVINE ESENȚIALĂ PENTRU REDEFINIREA CONTURULUI FEȚEI RESPECTÂND ARMONIA NATURALĂ A ACESTEIA

În cazul tenului tânăr, rețeaua densă de collagen se reînnoiește continuu, conferind suport și structură țesuturilor.

Totuși, în jurul vârstei de 40 de ani, ovalul feței începe să fie afectat de gravitație.

Pielea se lasă, obrajii devin goi, iar partea inferioară a feței se îngroașă. Rezultatul este o față obosită, cu un contur mai puțin definit, cu riduri și cute de expresie.

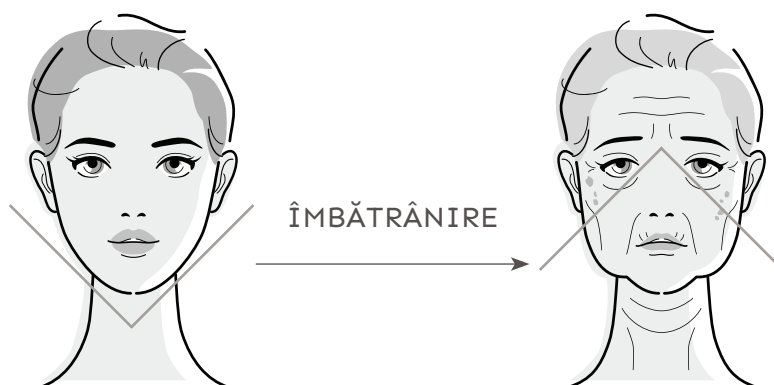

medicină estetică

Gama Valodé Fill
Skin Booster

ÎNȚELEGEREA DORINȚELOR PACIENȚILOR ESTE MISIUNEA SIALOR MILANO

Căutarea armoniei pentru evidențierea frumuseții unei persoane necesită tratamente personalizate și exclusive.

Femeia își dorește un contur facial bine delimitat, o piele radiantă și un aspect tineresc, proaspăt.

Bărbatul poate fi interesat de un profil masculin bine conturat și de un maxilar bine definit.

Atât femeia, cât și bărbatul vor să pară naturali și niciodată artificiali.

YALODÉ FILL

FILLER EXCLUSIV CU TRIPLU EFECT

Yalodé Fill oferă una dintre formulările de acid hialuronic liniar, derivată din biotehnologie, cu cea mai ridicată masă moleculară de 2.000 kDa de pe piață.

Yalodé Fill combate deficitul fiziologic de **acid hialuronic la nivel dermic și, datorită masei sale moleculare ridicate**, îmbunătățește textura și laxitatea pielii.

Adaugă volum ușor redefinind contururile care și-au pierdut armonia naturală.

Are o acțiune de ridicare verticală

Stimulează
neocollageneza și elastogeneza

Redefinește
contururile ovalului
feței într-un mod natural



EFICACITATEA YALODÉ FILL

Proprietățile higroscopice și viscoelastice ale acidului hialuronic cu masă moleculară mare permit hidratarea țesuturilor, favorizând remodelarea acestora cu efect corectiv al tonicității și al cicatricilor.


Este un sistem anti-îmbătrânire complet care asigură turgescența dermei prin îmbunătățirea progresivă a elasticității pielii.

YALODÉ FILL este destinat tratamentului imperfecțiunilor pielii și în special în anumite zone ale feței.

- Pliuri nasolabiale
- Riduri peribucale
- Riduri între sprâncene
- Riduri frontale
- Cicatrici faciale, inclusiv cicatrici de acnee
- Zone ale feței care au nevoie de îmbogățirea țesutului facial (obraji, bărbie, pomeți, buze) cu augmentare volumetrică temporară prin augmentarea țesuturilor moi.



ACȚIUNEA YALODÉ FILL

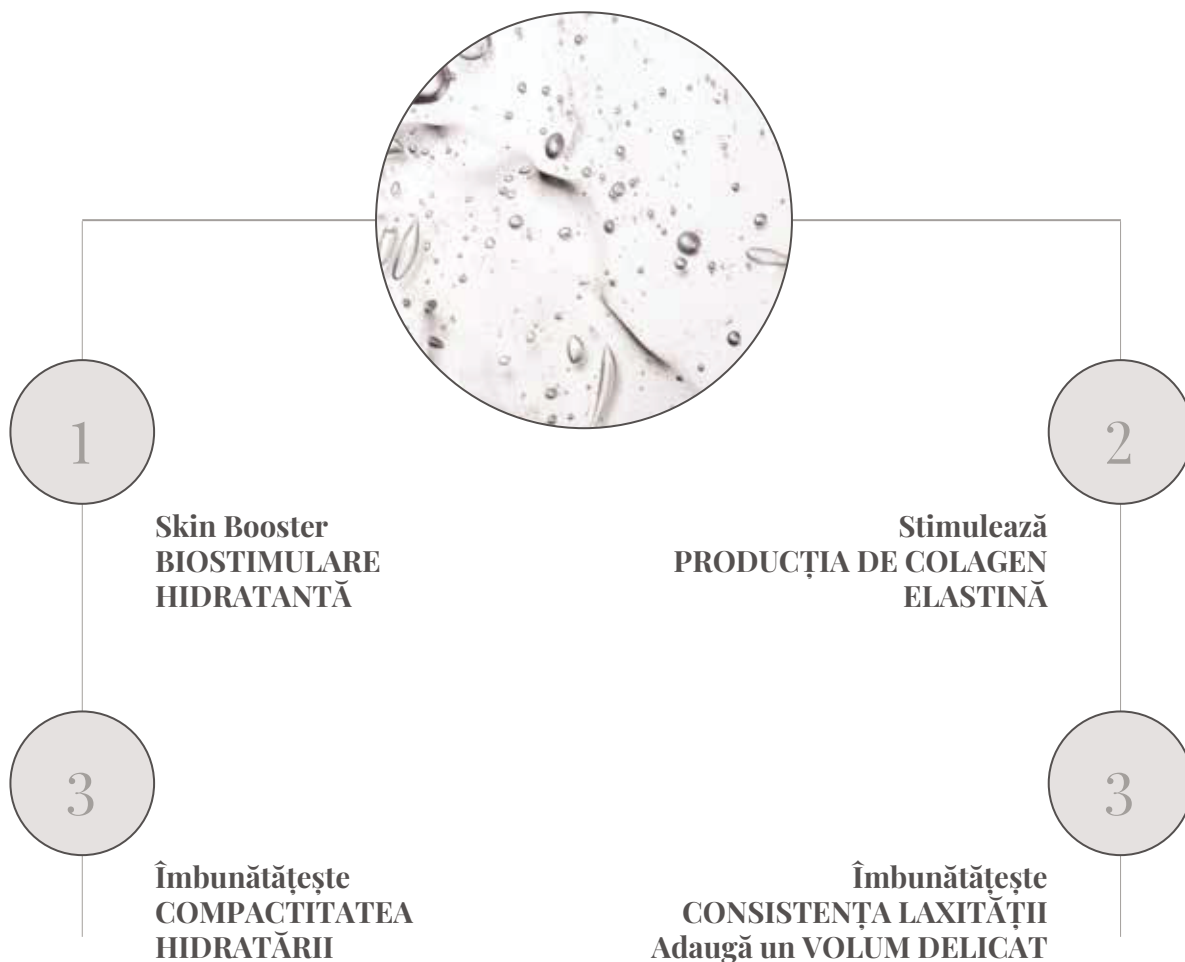

**RIDURILE CONTURULUI
OCHILOR**



SANT NAZOLABIAL






**LAXITATEA PIELII
GÂTULUI ȘI
CONTURULUI FEȚEI**

TEHNICA INJECTABILĂ DEDICATĂ FIECĂREI FEȚE

**PENTRU CA PACIENTUL SĂ FIE
MULTUMIT, ESTE NECESAR SĂ ÎI
ÎNȚELEGEM AȘTEPTĂRILE.**

Cu ajutorul Yalodé Fill este posibilă personalizarea tratamentului,
respectând naturațea fiecărei fețe.

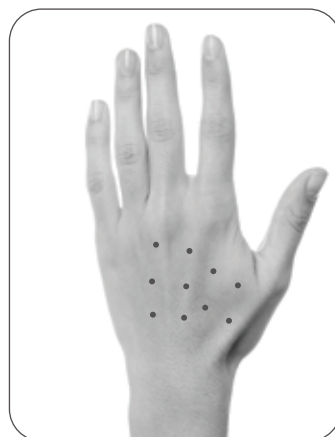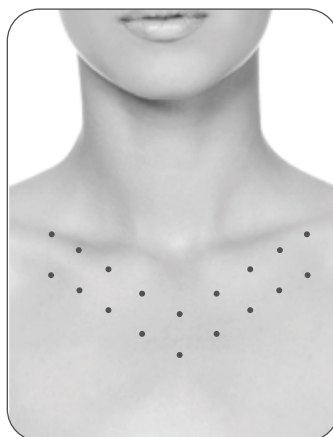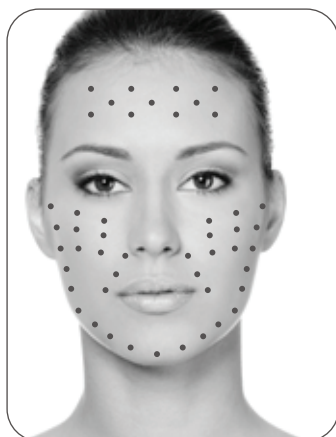

ADÂNCIMEA DE INJECTARE

Implantul trebuie plasat în dermul
median de suprafață
folosind un ac de 30 G x 13 mm.

CAPACITATE BUNĂ DE MODELARE

Matricea de gel coeziv este ușor
adaptabilă și modelabilă.
Pentru a distribui și mai bine produsul
injectat, se poate efectua
un masaj ușor.

REZULTATE VIZIBILE
pe o durată extinsă de până
la 12 luni

TRIPLU EFECT
lifting vertical, conturare,
neocolageneză

ELASTICITATE ȘI VÂSCOZITATE RIDICATĂ
acțiune de lifting și conturare

YALODÉ FILL 2% - YALODÉ FILL 2.5%



Previne reducerea acidului hialuronic, favorizând BIORESTRUCTURAREA țesutului cutanat.

Sigur și bine tolerat, îmbunătățește hidratarea, fermitatea și elasticitatea pielii.

Disponibil în 2 concentrații diferite de acid hialuronic reticulat pentru a asigura un tratament adecvat fiecărei nevoi terapeutice

DESIGN ERGONOMIC

pentru o mai bună administrare
de către specialist.

**CONTROLUL
MATERIALULUI INJECTAT**

cu ajutorul gradației de
pe seringă.

STABILITATEA OXIDULUI DE ARGINT

prin etanșarea
perfectă a dispozitivului
LuerLock.



Gama Yalodé Fill
Cross-Linked

YALODÈ FILL 2%

YALODÈ FILL 2.5%

Indicații de utilizare	Tratament pentru ridurile conturului buzelor	Tratamentul ridurilor faciale
Concentrație	20 mg/ml	25 mg/ml
Zonă de injectare	Derm preferabil stratul mai profund	Hipodermul supraperiostal profund
pH	6,00 – 7,50	6,00 – 7,50
Ac	27G 1/2"	27G 1/2"
Ambalaj	1 x 1 ml	1 x 1 ml
Durata rezultatului	4 - 8 luni	6 - 10 luni
Conservarea	5 – 25° C	5 – 25° C

Riduri pe frunte
Yalodé Fill 2.5%

Riduri de încruntare
Yalodé Fill 2.5%

Șanțuri nazolabiale
Yalodé Fill 2.5%

Riduri periorale
Yalodé Fill 2%

Comisura buzelor
Yalodé Fill 2%

Riduri de râs
Yalodé Fill 2%

Linii marionetă
Yalodé Fill 2.5%

Margine Vermilion
Yalodé Fill 2%

Volum bărbie
Yalodé Fill 2.5%

EFECTUL CORECTIV AL YALODÈ FILL (2.-2.5%) ESTE VIZIBIL IMEDIAT DUPĂ TRATAMENT

Acțiunea de reabilitare corectează eficient sindromul de golire a obrazilor în posturile ridurilor nasolabiale, Personalizează bărbia și armonizează ovalul feței, redefinind linia maxilarului.

Yalodè Fill (2-2.5%) acționează mecanic prin absorbția apei generând volumizarea zonei și biologic prin creșterea sintezei de neoCollagen și Glicozaminoglicani.

Efectul dublu face posibilă generarea unui volum care corectează imediat și permanent depresiunile pielii.



SIGUR & EFICIENT

STANDARDE DE ÎNALTĂ CALITATE

- **Acid hialuronic reticulat** de origine biotehnologică, în mod cert nu de origine animală.
- **Acid hialuronic reticulat maxim purificat.**

Acizi nucleici	≤ 0,2%
Proteine	≤ 0,1%
Cloruri	≤ 0,03%
Fier	≤ 80 ppm
Contaminare microbiană (TAMC)	≤ 100 CFU/g
Endotoxine bacteriene	≤ 0,05 I.U./mg

STERILITATE ASIGURATĂ A AMBALAJULUI

- Risc scăzut de reacții alergice.
- Sterilizare cu abur și iradiere.
- Durabilitate crescută a implantului.

TEHNOLOGIE AUXILIARĂ

Timpul de înjumătățire al acidului hialuronic cutanat nu depășește 48 de ore în echilibru între producția și distrugerea de către hialuronidaze.

Pentru a depăși această limitare, în medicina estetică, acidul hialuronic, pentru uz intradermic, este modificat prin reticulare pentru **a obține un produs mai rezistent la degradare și, prin urmare, mai durabil: reticulat.**

Activitatea acidului hialuronic reticulat, nu doar datorită funcției de restabilire a pierderii de volum și de umplere a ridurilor, ci și a unei stimulări prelungite care, după timp, permite ameliorarea ulterioară a țesutului cutanat tratat și, prin urmare, constituie un plus de importanță considerabilă.



TEHNOLOGIE DE RETICULARE

Acidul hialuronic reticulat are punți care leagă moleculele de HA (acid hialuronic), formând o structură tridimensională. Acest sistem prezintă o rezistență puternică împotriva proceselor de degradare ale hialuronidazelor și, în consecință, o durabilitate mai mare.

BDDE este utilizat ca agent de reticulare, care formează legături covalente puternice între grupele hidroxil ale lanțurilor HA (acid hialuronic), crescând rezistența și rigiditatea rețelei 3D.

GRANULAȚIE UNIFORMĂ

HA (acidul hialuronic) este selecționat cu meticulozitate la nivel granular pentru a garanta o dimensiune medie a particulelor bine definită și constantă în vederea asigurării unui produs caracterizat de un standard de calitate ridicat.



office@sialormilano.ro
www.sialormilano.ro



sialor_romania



sialor romania